

**PROCEDIMENTOS
DE COLHEITA**

ULS LSP da Guarda



**LSP DA
GUARDA**



Tlf: 271210840 ext 200 / 220
Tlm: 964307688
Fax: 271223104
Correio electrónico:
paula.lourenco@ulsguarda.min-saude.pt





**PROCEDIMENTOS
DE COLHEITA
PARA ÁGUAS DE
CONSUMO
HUMANO**

**LABORATÓRIO DE
SAÚDE PÚBLICA DA
GUARDA**

Tel.: 271210840

Procedimento para colheita de

Águas de Consumo Humano

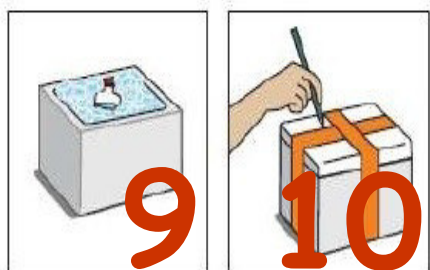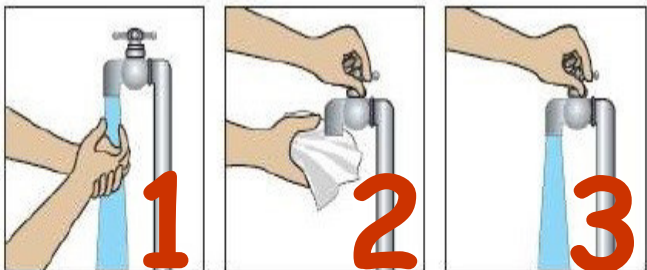

Procedimento para colheita de

Águas de Consumo Humano

- 1—Lave as mãos antes da recolha de amostra
- 2—Limpe a torneira
- 3—Abrir a torneira em jacto forte (1-2 minutos)
- 4—Esterilizar a torneira com chama (algodão embebido em álcool)
- 5—Abrir a torneira com jacto reduzido
- 6—Retirar a tampa do frasco de colheita e encher até 2/3 do frasco (até à marca—**Não Encher!!**)
- 7—Rolhar bem o frasco
- 8—Identificar o ponto de colheita (Data; Hora de Colheita; T^o; Tipo de Amostra)
- 9—Acondicionar a amostra numa mala refrigerada
- 10—Entregar a amostra no Laboratório de Saúde Pública de 2^a a 4^a das 9H00 até as 14H00

NOTA:

Entregar a amostra o mais rapidamente possível no Laboratório;
Não exceder as 6 horas.